



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Üveg mérleg GS 80 Rend. szám: 86 03 24

- Üveg mérleg;
- Külső érzékelő
- 4 db ceruzaelem (mérleg)
- 2 db mikroelem (külső érzékelő)
- Használati útmutató

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékeink egyikének megvásárlása mellett döntött. A cégünk jó minőségű, alaposan megvizsgált minőségi termékeket kínál a meleg, testsúly, vérnyomás, testhőmérséklet, pulzus, lágy terápia, masszázs és levegő tárgykörből.

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználásra, illetve tegye elérhetővé más felhasználók számára is, és tartsa be az utasításokat. Baráti ajánlással a Beurer-Team

1. A készülék működésének megismeréséhez

Ez a mérleg személy mérésére szolgál és eközben mutatja a pontos időt, a belső és külső hőmérsékletet, valamint előre jelzi az időjárást.

A mérleg a következő funkciókkal rendelkezik:

- Testsúly mérés
- Óraidő
- Belső és külső hőmérséklet
- Időjárás-előrejelzés
- Ébresztési funkció
- Átkapcsolható kilogramm, font „lb” és Stones „st” között
- Automatikus kikapcsolás funkció
- Elemcsere jelzés gyenge elemnél

2. Biztonsági tudnivalók

Figyelmeztetés:



- Ne álljon egyoldalasan a mérleg legszéleire: felbillenés veszély!
- Tartsa távol a gyerekeket a csomagolóanyagoktól (fulladás veszélye).
- A lenyelt elem életveszélyt jelenthet. Tartsa az elemeket gyermekek számára elérhetetlen helyen. Egy elem lenyelése esetén azonnal vegyen igénybe orvosi segítséget.
- Az elemeket nem szabad feltölteni vagy más anyagokkal reakcióba hozni, nem szabad szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárn.

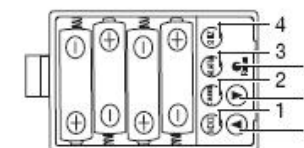
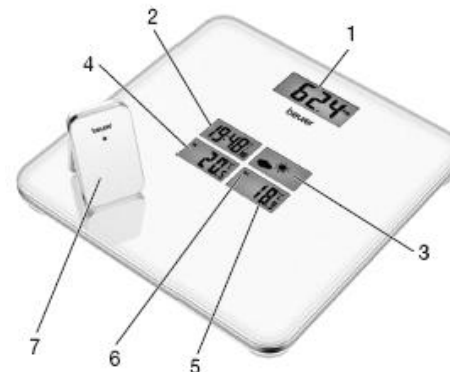
- Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak, amelyek az egészséget veszélyeztetik és a környezetet károsítják. Ezért feltétlenül az érvényes törvényi előírások szerint ártalmatlanítsa az elemeket.
- Az elemeket sohase dobja a szokványos háztartási szemétkébe.

Általános tudnivalók

- A készülék csak saját célokra szolgál, nem való orvosi vagy iparszerű alkalmazásra.
- A mérleg terhelhetősége max. 150 kg (330 lb/24 st).
- Reklamáció előtt mindig ellenőrizze az elemeket és adott esetben cserélje ki azokat.
- Javítást csak az ügyfélszolgálat vagy az arra feljogosított kereskedők végezhetnek.
- Amennyiben további kérdései merülnek fel a készülékeinkkel kapcsolatban, forduljon a kereskedőhöz, vagy az ügyfélszolgálatunkhoz.

3. A készülék leírása

- 1 Súly kijelzés
 - 2 Pontos idő
 - 3 Időjárás előrejelzés
 - 4 Belső hőmérséklet
 - 5 Külső hőmérséklet
 - 6 Csatorna
 - 7 Kültéri érzékelő
- Elemtartó rekesz magyarázat
- 1 MODE gomb
 - 2 CHANNEL gomb
 - 3 ALARM gomb
 - 4 SNZ gomb
 - 5 ▲ gomb
 - 6 ▼ gomb
 - 7 Reset gomb



4. Üzembe helyezés

Vegye ki az elemet a védőcsomagolásból és helyezze be a polaritásnak megfelelően először a mérlegbe, majd 60 másodpercen belül a külső érzékelőbe.

Az elemek behelyezése után az LCKijelzőn a külső hőmérséklet mezőben „-.-.-”, jelenik meg, és a rádió szimbólum villog.

Ettől kezdve a mérleg veszi a külső hőmérséklet érzékelő jeleit. Az átvitel sikeres, mielőtt a külső hőmérséklet megjelenik.

Amennyiben a mérleg nem működik, vegye ki és ismételtelen helyezze be az elemeket.

Vigyázzon közben a helyes polarításra. Ezen kívül megnyomhatja a „Reset” gombot is. Nyomja meg a CHANNEL gombot az 1. csatorna (CH1) kiválasztásához, mivel a kültéri érzékelő mindig az 1 csatornát keresi.

5. Beállítások

Az óraidő beállítása

Nyomja meg Standby módban (óraidő beadva) 3 másodpercig a MODE gombot. Válasszon a 24- és a 12-órás időjelzés mód között. Erősítse meg MODE-dal. Állítsa be az óraidőt (órát és percek) a ▲ és ▼ gombokkal, igazolja a bevitt adatokat a MODE-dal.

Ébresztés beállítása

Nyomja meg Standby módban a MODE gombot. A kijelzőn „AL” jelenik meg (2). Tartsa a MODE gombot 3 másodpercig megnyomva. A ▲ és ▼ gombokkal beállíthatja az ébresztési időt. Erősítse meg a bevitt adatot a MODE gombbal.

Az ébresztőóra aktiválása / deaktiválása

Nyomja meg a Standby módban az ALARM-ot. Az ébresztő szimbólum  megjelenik a kijelzőn (2). Az ALARM gomb ismételt megnyomásával az ébresztés deaktiválható. A beállított ébresztési időpontban egy gyorsuló hangjelzés hangzik fel. Nyomja meg az SNZ gombot a szunyókálás funkció aktiválásához - az ébresztőóra 5 perc múlva újra megszólal. Nyomjon egy tetszőleges gombot, az ébresztő hang leállítására.

A hőmérséklet mértékegység beállítása

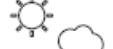
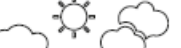
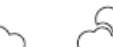
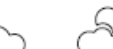
Nyomja meg a Standby módban a ▼ -gombot, a °C és °F közötti választáshoz.

Az időjárásjelzés beállítása

Állítsa be a jelenlegi időjárás helyzetet. Tartsa a ▲ gombot megnyomva, amíg egy hangjelzés fel nem hangzik. Válassza ki a ▼ gombbal a 12 órával korábbi időjárási helyzetet. Igazolja a ▲ gombbal. Az állomás jelzi a következő 12 órában várható időjárás változást.

Ahhoz, hogy Ön a legrészletesebb időjárási információt kapja, a mérleg különböző időjárás szimbólumokat használ.

Időjárás előrejelzésenként a mérleg a következő villogó időjárás szimbólumokat használja:

	1.	2.	3.	4.
				
Napos				
Enyhén felhős				
Felhős				
Gyenge csapadék				
Havazás				

Az időjárás előrejelzéshez a légnyomásváltozást méri. Óránként összehasonlítja a légnyomás értékeket. Ha növekszik a légnyomás, egy nagynyomású képződmény várható. Az időjárás előrejelzés átvált a "napos" kijelzés irányába. Eső légnyomásnál ennek ellentéte jön létre.

6. Elemcsere

A mérleg az elemcserere figyelmeztetéssel van ellátva. A kijelzőn (1) „Lo” jelenik meg, ha az elemek túl gyengék és a mérleg automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben az elemeket minél előbb ki kell cserélni (4 db ceruzaelem).

A külső érzékelőnél az elemeket akkor kell kicserélni, ha a mérleg nem vesz rádiójeleket (2 db mikroelem). A külső érzékelő kereséséhez tartsa 3 másodpercen keresztül megnyomva a CHANNEL gombot. Ellenőrizze, hogy a mérleg az 1 csatornára (CH1) van-e állítva.

7. Súlymérés

Helyezze a mérleget egy egyenes szilárd (nem szőnyeg) padlóra; a szilárd padlóburkolat a helyes mérés alapfeltétele.

Érintse meg röviden a mérleget, a kijelzőn röviden „CAL”, „00 kg” -ig jelenik meg. Álljon a mérlegre.

Mindkét lábára egyformán támaszkodva álljon nyugodtan a mérlegen. Röviddel ezután megjelenik a mérési eredmény. Ha lelép, a mérleg kb. 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

Addig a mérési eredmény látható.

A mérleg 150 kg-os teherbírásának túllépése esetén, a kijelzőn „o_LD” jelenik meg.

8. A készülék tisztítása és ápolása

Időről időre a készüléket meg kell tisztítani.

A tisztításra egy nedves ruhát használjon, amelyre szükség esetén vigyen fel egy kevés öblítőszer.

Ne használjon erős tisztítószer, és soha ne tartsa a készüléket víz alá.

Figyelem:



- Sohase használjon erős oldó- és tisztítószeret!
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- A készüléket nem szabad a mosogatógépben tisztítani!

9. Ártalmatlanítás

Az elemeknek és akkuknak nincs helye a háztartási szemétkben. Felhasználóként törvény kötelezi az elhasznált elemek leadására. Az elhasznált elemeket a környékén lévő nyilvános gyűjtőhelyen adhatja le, vagy bárhol, ahol az adott típusú elemet értékesítik.

Figyelem!

Ezek a jelek találhatók a károsanyag tartalmú elemeken:

Pb = az elem ólmot tartalmaz,

Cd = az elem kadmiumot tartalmaz,

Hg = az elem higanyt tartalmaz.

Tartsa be a helyi előírásokat a termék eltávolítására vonatkozóan.

Ártalmatlanítsa a készüléket az elektromos és elektronikai hulladékokra vonatkozó 2002/96/EC EK irányelvnek- és a

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) előírásainak megfelelően. Kérdések esetén forduljon az eltávolításért felelős kommunális hatósághoz.



10. Mi a teendő hiba esetén?

Amennyiben a mérleg hibát észlel, a kijelzőn a következő jelenik meg:

Kijelzés	Ok	Elhárítás
0_Ld	– A maximális 150 kg-os teherbírást túllépte.	Csak 150 kg-ig szabad terhelni.
Lo	Az elemek ki vannak merülve.	Cserélje ki a mérlegben az elemeket
CAL	A mérleg keresi a nulla állását.	Várjon, amíg „0.0 kg” meg nem jelenik.
LL:L	Belső hőmérséklet < -10°C Külső hőmérséklet < - 50°C	A belső vagy a külső hőmérséklet a mérési tartományon kívül esik
HH:H	Belső hőmérséklet < -50°C Külső hőmérséklet > 70°C	A belső vagy a külső hőmérséklet a mérési tartományon kívül esik.

Nem lehet mérni vele

Lehetséges hibák	Elhárításuk
A mérleg nem lett a reá való fellépés előtt aktiválva. Ha a mérlegre rááll azelőtt, hogy a kijelzőn a „0.0 kg” megjelenne, a mérleg nem fog helyesen működni.	Szabályosan aktiválja a mérleget (várjon amíg „0.0 kg” meg nem jelenik) és ismétlje meg a mérést. Adott esetben várjon 30 másodpercig, majd ismétlje meg a mérést.
Zavar van a mérleg és a külső érzékelő közötti összeköttetésben.	Helyezze be újból a mérleg és a külső érzékelő elemeit, a mérleg a behelyezéskor hangjelzést ad. Tartson nagyobb távolságot a következő elektromágneses forrásoktól: távvezeték oszlopoktól, TV és számítógép rádiórendszerektől, fitnesz berendezésektől, mobiltelefonoktól, időjárásjelző készülékektől.
A külső érzékelő túl messzire helyezkedik el a mérlegtől.	Csökkentse a mérleg és a külső érzékelő közötti távolságot, a maximális távolság 30 m (akadálymentes szabadtéren).
A mérleg elemei lemerültek.	Cserélje ki az elemeket (lásd 4 oldal).
A külső érzékelő elemei kimerültek.	Nem jelenik meg időjárás előrejelzés. Cserélje ki a külső érzékelő elemeit.

Ezennel garantáljuk, hogy jelen termék megfelel az európai R&TTE 1999/5/EC irányelvnek. Vegye fel az alul megnevezett ügyfélszolgálatl a kapcsolatot, ha részletesebb adatokra - vagy a EK megfelelőségi nyilatkozatra van szüksége.

11. Műszaki adatok

Mérési tartomány:	2 – 150 kg, beosztás 100 g
Belső hőmérséklet	-10°C ... +50°C
Külső hőmérséklet	-50°C ... +70°C
Hőmérséklet osztás	0,1°C
Rádiójel átvitel	433 MHz

Hatótávolság	30 méter (akadálymentes szabadtéren)
Belső hőmérséklet	Mérések közötti időköz 30 másodperc
külső hőmérséklet	Mérések közötti időköz 57 másodperc

12. Garancia és szerviz:

A garancia nem érvényes:

- a szakszerűtlen használat következtében bekövetkezett hibák esetén,
- a fogyó anyagokra,
- azokra a hiányosságokra, amikről a vevő a vásárláskor tudomást szerzett,
- a vevő által okozott károokra.

A vevőnek törvény által garantált szavatosságot a garancia nem érinti. A garancia időtartama alatt a garancia érvényesítéséhez a vevőnek a vásárlást bizonyítania kell (számlával). A garanciát a vásárlás időpontjától számított 3 évig a Beurer GmbH céggel szemben, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Németország, lehet érvényesíteni. Garanciális esetben a vevőnek joga van a termék megjavíttatására a gyártó saját szervezeteiben vagy az általa arra feljogosított szervizekben. További jogosultságok (a garanciából kifolyólag) a vevőt nem illetik.